

Tanitim

IncoTWIN, idrar ve fekal inkontinansın çeşitli şekillerinin tedavisi için geliştirilmiştir. Dört güncel tedavi yöntemi uygulanabilir:


1. EMG biofeedback eğitimi
 2. Elektrostimülasyon
 3. EMG biofeedback eğitimi ve elektrostimülasyon Kombinasyonu
 4. EMG kontrollü elektrostimülasyon
- Program ayarı, genellikle cihaz elden çıkarmadan önce tıbbi talimatlara göre tarafımızdan yapılır ve ardından yanlışlıkla ayarlanmaya karşı kilitlenir.

Önemli not:

Bu hızlı kılavuz IncoTWIN kullanım talimatlarının tamamlayıcısıdır. Cihazı kullanmadan önce Kullanma talimatlarına dikkat edin. IncoTWIN sadece bu ek bilgiler temelinde kullanılamaz.

Bağlantı soketleri ve çalıştırma elemanları:

Bağlayıcı tarafı:

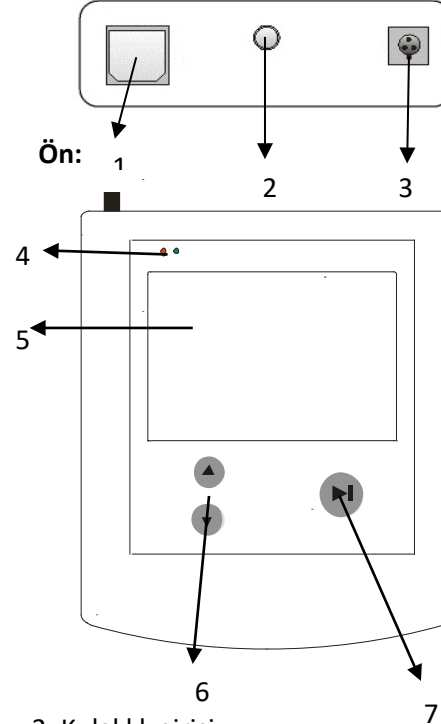

2. Kulaklık girişi
3. Prob / güç kaynağı konnektörü
4. şarj durumu göstergesi
5. ekran
6. yoğunluk denetleyicisi / gerekirse Program seçimi
7. Başlat / Duraklat / OK düğmesi

Hastalar için hızlı rehber

EMG kontrollü inkontinans terapi cihazının kullanım talimatları hakkında ek bilgi
IncoTWIN



Eđitim Hazırlığı:

1. Probu / elektrotları ve kulaklıkları cihaza bađlayın.
2. Prob ucuna bir damla jel koyun.
3. Prob ekleyin:
 - vajinal prob ile Sırtüstü pozisyonda
 - Rektal prob ile yan pozisyonda
4. Cihazı OK tuşuyla açın.
5. Gerekirse "2 program" seçin: Δ veya ∇ tuşlarıyla istediđiniz çalışma modunu seçin.
6. OK düđmesine basın

Eđitim prosedürü:

Elektrostimülasyon seçimi

7. Kas önemli ölçüde daralana kadar akımı arttırmak için Δ düđmesini kullanın.
8. OK tuşu ile onaylayın.

Biofeedback seçimi

7. Kulaklıkların veya ekrandaki talimatları izleyin ve pelvik tabanınızı maksimum deđer tespit için 4 kez şiddetle sıkın.

Alternatif eđitim seçimi

- 7 Kulaklıkların üzerindeki veya ekrandaki talimatları izleyin ve pelvik tabanınızı maksimum deđer tespiti için 4 kez şiddetle sıkın.
8. Kasın anlamlı şekilde darbe gelene kadar birleşmesini arttırmak için Δ düđmesini kullanın.
9. Tamam tuşuyla onaylayın.

EMG kontrollü elektrostimülasyonun seçimi

7. Kulaklıkların üzerindeki veya ekrandaki talimatları izleyin ve pelvik tabanınızı maksimum deđer tespiti için 4 kez şiddetle sıkın.
8. Kasın anlamlı şekilde darbe gelene kadar birleşmesini arttırmak için Δ düđmesini kullanın.
9. Tamam tuşuyla onaylayın.

Sensörün temizlenmesi

Her kullanımdan sonra sensörü çalışırken, ılık suyla temizleyin. Ađır derecede kirlenmişse sabun veya yıkama losyonu kullanın. Sensörü yumuşak bir bezle kurutun ve kilitli bir plastik torbaya koyun. Kabloyu ıslatmayın. Köpüklü temizleyiciler kullanmayın. Kontak elektrotları bozulabilir.

Pili şarj etme

Cihazda kalıcı olarak pil takılıdır. Piller, kapalı güç kaynađını kullanarak Prob bağlantısı yoluyla şarj edilir. Şarj işlemi sırasında yeşil şarj göstergesi yanar. Şarj işlemi tamamlandığında turuncu şarj göstergesi yanar. Tamamen şarj işlemi yaklaşık 5 saat sürer.