

## Einleitung

Das Pelvita+MF ist ein Medizinprodukt der Klasse 2a. es wurde für die Behandlung von Stuhlinkontinenz entwickelt. Das Mittelfrequenz-Elektrotherapiegerät wird für das kontrollierte Sphinktertraining eingesetzt. Drei zeitgemäße Therapiemethoden sind durchführbar:


1. Das EMG Biofeedbacktraining
2. Die Elektrostimulation
3. Die Kombination aus EMG-Biofeedbacktraining und Elektrostimulation
4. Die EMG-gesteuerte Elektrostimulation

Die Programmeinstellung wird üblicher-weise von uns anhand der ärztlichen Vorgaben vor der Geräteübergabe einmalig vorgenommen und dann gegen eine versehentliche Verstellung gesperrt.

## Wichtiger Hinweis


Diese Kurzanleitung ergänzt die Gebrauchsanweisung des Pelvita+MF. Bevor Sie das Therapiegerät verwenden, sind alle medizinischen und technischen hinweise der Gebrauchsanleitung zu beachten. Das Pelvita+MF darf nicht auf der alleinigen Grundlage dieser Zusatzinformation angewendet werden.

## Anschlussbuchsen und Bedienelemente

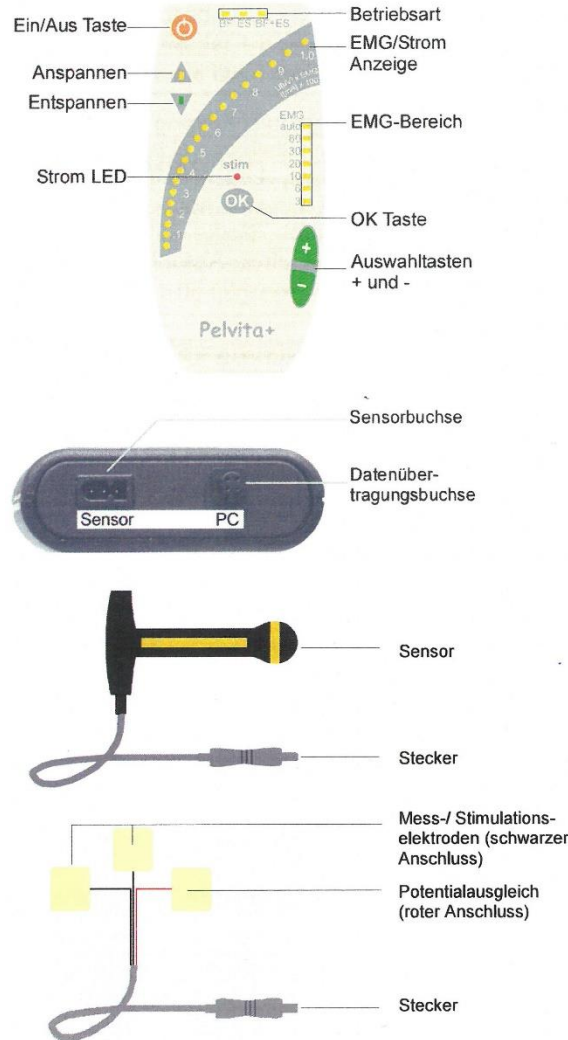

## Kurzanleitung für Patienten

Zusatzinformationen zur Gebrauchsanweisung für das mittelfrequente Therapiegerät Pelvita + MF

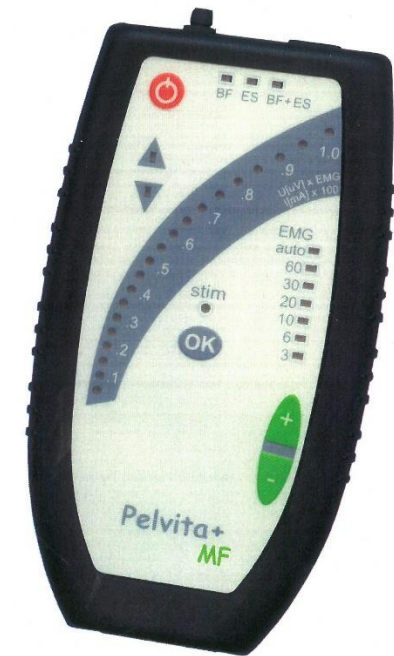

Vertrieb durch:



Bitte üben Sie entsprechend der markierten Anleitung:

## Biofeedback

1. Rektalsensor platzieren und mit dem Gerät verbinden
2. Gerät einschalten
3. Betriebsart BF mit „+/-“ Tasten auswählen
4. OK-Taste drücken
5. Wenn grünes Lämpchen im Pfeil „V“ leuchtet, Muskeln entspannen
6. Wenn gelbes Lämpchen im Pfeil „^“ leuchtet, Muskeln anspannen
7. Gerät schaltet sich automatisch aus

## Elektrostimulation

1. Rektalsensor platzieren und mit gerät verbinden
2. Gerät einschalten
3. Betriebsart BF mit „+/-“ Tasten auswählen
4. OK-Taste drücken
5. Wenn gelbes STIM-Lämpchen blinkt, dann die Stimulationsstärke mit „+“ oder „-“ Taste einstellen.
6. OK-Taste drücken
7. Gerät schaltet sich automatisch aus

## Kombinationstraining BF+ES

1. Rektalsensor platzieren und mit dem Gerät verbinden
2. Gerät einschalten
3. Betriebsart BF+ES mit „+/-“ Tasten auswählen
4. OK-Taste drücken
5. Wenn gelbes STIM-Lämpchen blinkt, dann die Stimulationsstärke mit „+“ oder „-“ Taste einstellen.
6. OK-Taste drücken
7. Wenn grünes Lämpchen im Pfeil „▽“ leuchtet, Muskeln entspannen
8. Wenn gelbes Lämpchen im Pfeil „△“ leuchtet, Muskeln anspannen
9. Gerät schaltet sich automatisch aus

## EMG-gesteuerte Elektrostimulation

1. Rektalsensor platzieren und mit dem Gerät verbinden
2. Gerät einschalten
3. Betriebsart EMG gesteuerte Elektrostimulation mit „+/-“ Tasten auswählen (BF- und ES-Anzeige blinken gleichzeitig)
4. OK-Taste drücken
5. Wenn gelbes STIM-Lämpchen blinkt, dann die Stimulationsstärke mit „+“ oder „-“ Taste einstellen.
6. OK-Taste drücken
7. Wenn grünes Lämpchen im Pfeil „▽“ leuchtet, Muskeln entspannen
8. Wenn gelbes Lämpchen im Pfeil „△“ leuchtet, Muskeln anspannen
9. Gerät schaltet sich automatisch aus

## Reinigen des Sensors

Den Sensor nach jedem Gebrauch unter fließendem, handwarmem Wasser reinigen. Bei starker Verschmutzung zusätzlich Seife oder Waschlotion verwenden. Sensor mit weichem Tuch abtrocknen und in einem unverschlossenen Kunststoffbeutel aufbewahren.

Stecker nicht nass machen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Die Kontaktelektroden könnten zerstört werden.